




neodisher[®] SBN plus



Speciální oplachový prostředek k použití v mycích a dezinfekčních zařízeních na podložní mísy

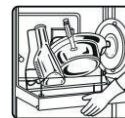

Tekutý koncentrát

Oblast použití:

- Uvolnění vápenatých usazenin a závěrečný oplach při zpracování podložních mís a močových lahví v mycích a dezinfekčních zařízeních s parní dezinfekcí

Spektrum účinků:

- Účinně brání vápenatým usazeninám ve vyvíječi páry, potrubích a tryskách i při vysoké tvrdosti vody
- Se speciálními komponentami k účinné redukci tvrdosti vody
- S tenzidy v nepěnivém složení pro optimalizované a rychlé schnutí beze skvrn a vápenatých usazenin

Speciální vlastnosti:

- S příjemně svěží vůní, spolehlivě překryje nepříjemné pachy
- Lze používat při jakékoliv tvrdosti vody
- Kyselé složení, na bázi organických kyselin

Použití a dávkování:

neodisher SBN plus se používá v mycích a dezinfekčních zařízeních na podložní mísy a močové lahve s parní dezinfekcí. Dávkování probíhá pomocí dávkovacích zařízení přístroje a činí podle tvrdosti vody 0,5–1,5 ml/l. Dbejte na odolnost dávkovacích systémů a vyvíječů páry proti kyselinám.

Při odolných nečistotách doporučujeme doplnkově použít neodisher SBR extra, speciální čisticí prostředek na podložní mísy a močové lahve.

Obecné pokyny k použití:

- Pouze pro průmyslové použití.
- Před změnou přípravku propláchněte dávkovací systém včetně sacích hadic vodou.
- Zpracování musí probíhat v souladu s legislativou pro zdravotnické prostředky a platnými předpisy za použití vhodných validovaných postupů.
- Dodržujte prosím doporučení výrobce zdravotnického prostředku pro zpracování v souladu s požadavky normy DIN EN ISO 17664.
- Je třeba dodržovat návody k obsluze výrobců mycích a dezinfekčních prostředků.
- Nesměšujte s jinými přípravky.

Technické údaje:

Hodnota pH	3,5–3,1 (0,5–1,5 ml/l, stanoveno v demineralizované vodě, 20 °C)
Viskozita	< 50 mPa·s (koncentrát, 20 °C)
Hustota	cca 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Složení:

5–15 % neiontových tenzidů
< 5 % polykarboxylátů
kromě toho konzervanty (methylchlorisothiazolinon/methylisothiazolinon), vonné látky

Označení CE:


neodisher SBN plus splňuje požadavky vyplývající z evropské legislativy pro zdravotnické prostředky.

Pokud dojde k závažnému incidentu s tímto výrobkem, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.



neodisher[®] SBN plus

Pokyny pro skladování:

Skladujte při teplotě od 0 do 30 °C. Při správném skladování lze uchovávat po dobu 3 let. Použití do: viz údaj na štítku za symbolem .

Informace o nebezpečnosti a bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace a údaje o ochraně životního prostředí najdete v bezpečnostních listech. Jsou dostupné na stránkách www.drweigert.com v sekci „Service/Downloads“.

Likvidujte pouze prázdné a uzavřené obaly.
Likvidace zbytků přípravku: viz bezpečnostní list.

MB 4792/3-2 Stav 03/2020

Distributor v ČR:

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50, 602 00 Brno | +420 545 537 111 | mail@bmt.cz | www.bmt.cz

Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. To však nezbavuje uživatele povinnosti provádět vlastní testy a zkoušky. Ani z něj nelze vyvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech.
