



PrinterArchive

Archivační software

pro parní sterilizátory BMT

Univerzální archivace
protokolů o sterilizaci

Protokol	Start programu
> SPSIMX6X_000000	
> SPSIMX6X_B80660	
> SPSIMX53_B80660	
> SPSL_000000	
▼ SPSL_5181215	
00000002.PRT [P8 Test vakua_2 6.0]	2019-01-15 08:17:51
00000003.PRT [P8 Test vakua_2 6.0]	2019-01-15 08:42:18
00000004.PRT [P4 Guma 121.0]	2019-01-15 09:08:35
00000005.PRT [P3 Univerzal kontejnery 134.0]	2019-01-15 09:59:35
00000006.PRT [P2 Univerzal 134.0]	2019-01-15 11:24:04
00000007.PRT [P7 Nastroje rychle 134.0]	2019-01-15 12:01:31
00000008.PRT [P5 Bowie+Dick test 134.0]	2019-01-15 12:23:55
00000009.PRT [P6 Test vakua 10.0]	2019-01-15 13:01:17
00000010.PRT [P1 Nahřátí 134.0]	2019-01-15 13:22:31
SPSL_5190181	
▼ SPSL_5190230	
00000002.PRT [P8 Test vakua_2 6.0]	2019-02-27 08:25:27
00000003.PRT [P4 Guma 121.0]	2019-02-27 08:48:24
00000004.PRT [P4 Guma 121.0]	2019-02-27 11:24:42
00000005.PRT [P3 Univerzal kontejnery 134.0]	2019-02-27 12:20:03
00000006.PRT [P5 Bowie+Dick test 134.0]	2019-02-27 13:30:39
00000007.PRT [P6 Test vakua 10.0]	2019-02-27 14:13:03
00000008.PRT [P1 Nahřátí 134.0]	2019-02-27 14:33:09
▼ SPSL_B80660	
00000005.PRT [P3 Univerzal kontejnery 134.0]	2015-12-17 08:26:44
00000009.PRT [P8 Optika 134.0]	2016-03-23 14:59:13
00000010.PRT [P3 Univerzal kontejnery 134.0]	2016-10-13 12:39:01
00000016.PRT [P1 Nahřátí 134.0]	2019-02-07 12:19:07
00000017.PRT [P1 Nahřátí 134.0]	2019-02-12 11:53:38



chráníme zdraví lidí

Komunikační software PrinterArchive pro parní sterilizátory BMT

PrinterArchive - byl vyvinut pro univerzální archivaci protokolů o sterilizaci z přístrojů řady parních sterilizátorů v počítači.

PrinterArchive - umožňuje nejen pomocí přídavné tiskárny ke sterilizátoru, ale také připojením k vašemu PC archivovat a dále zpracovávat protokoly o sterilizaci.


PrinterArchive - je racionální a smysluplné řešení pro centrální monitorování a záznam dat o sterilizaci na vašem pracovišti.

PrinterArchive - umožňuje dále exportovat data do formátu PDF, případně CSV pro další zpracování. Přístroje umožňující připojení USB Flash disku umožňují exportovat protokoly v nativním formátu PrinterArchivu, který následně umožní další práci s daty v PrinterArchivu.

U přístrojů STERIVAP® a UNISTERI® navíc PrinterArchiv podporuje zaslání upozornění prostřednictvím emailu na právě skončenou sterilizaci, chyby a další. U přístrojů STERIVAP® a UNISTERI® navíc umožňuje kontrolovat integritu dat.

PrinterArchive - se spouští ihned po spuštění systému, není nutné přihlášení obsluhy.


PrinterArchive - lze ihned snadno připojit samostatným kabelem k parním sterilizátorům bez jakýchkoliv úprav přístrojů (rozhraním RS232, USB nebo Ethernet). Software je volitelným vybavením všech těchto přístrojů.

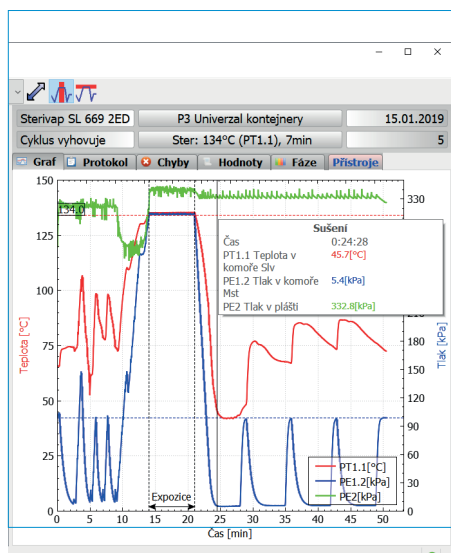

- snadná obsluha
- operační systém Windows
- jednoduché ovládání
- centrální monitorování a záznam dat o sterilizaci
- možná detailní práce s grafem, jeho posouvání a přibližování.
- počet připojených přístrojů je závislý na volbě rozhraní, případně na počtu volných sériových portů na PC
- možná uživatelská úprava systému na míru
- automatická synchronizace protokolů s PC

Mínimální systémové požadavky

- operační systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10
- ethernet, USB nebo RS232
- systémová paměť 1GB
- volné místo na pevném disku 4GB

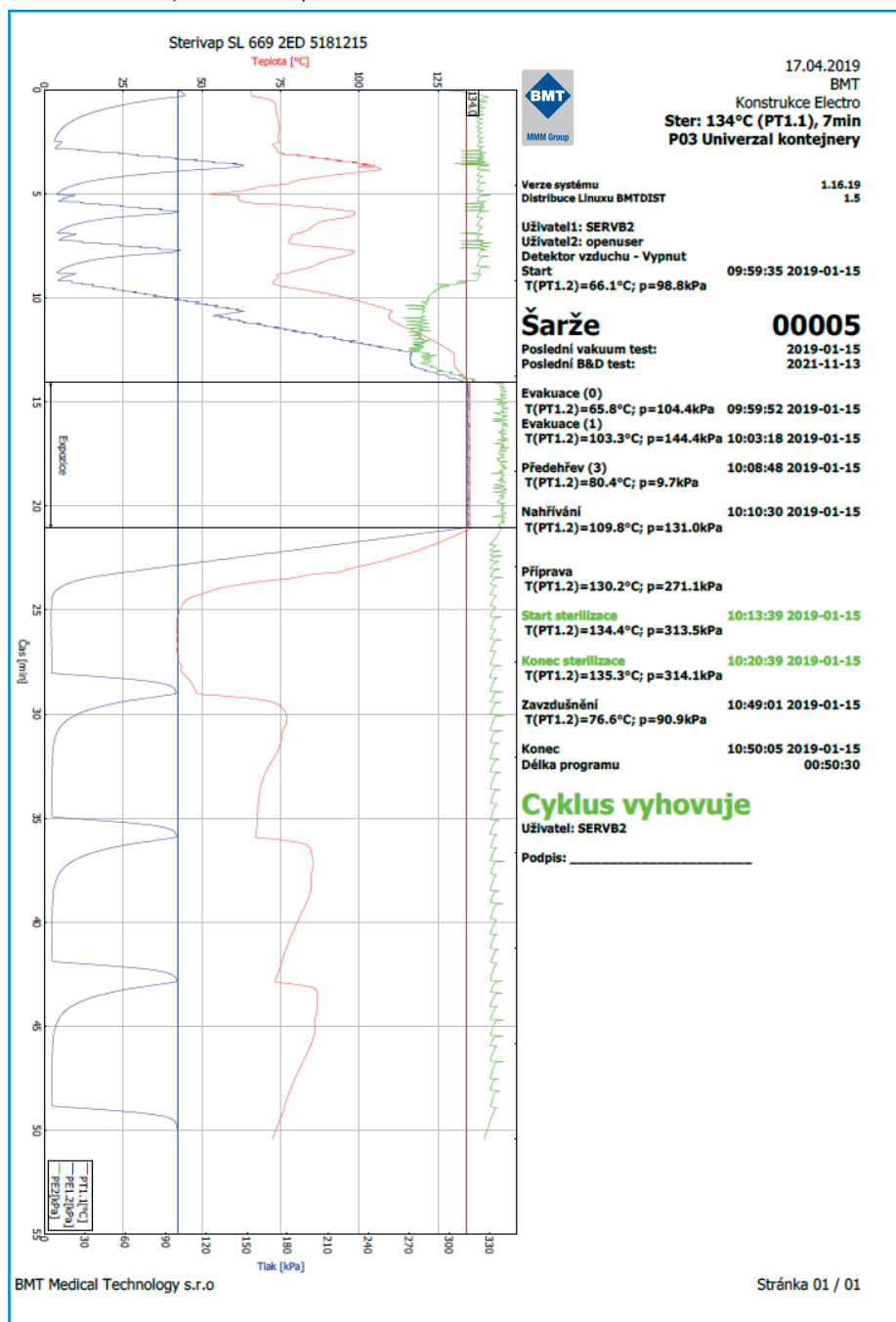

youtube.com/bmtbrno



facebook.com/bmt.cz